



09

Retenedores linguales
Alambre de laboratorio

78

79

SUMINISTRO DE LABORATORIO

Retenedor lingual fotopolimerizable

Puesto que en la boca nunca se tiene un campo completamente seco, es necesario un cementado que funcione desde el principio y siempre. Las almohadillas multiperforadas proporcionan al adhesivo fotopolimerizable una máxima exposición para un cementado rápido y seguro.

- Fabricado con alambre de .030"
- Duradero y fácil de moldear.
- Los tamaños se miden de un extremo distal de la cúspide al otro.



■ 4618-410

Retenedor lingual fotopolimerizable		
tamaño	mm	art. nº
0	24	4618-410
1	25	4618-411
2	26	4618-412
3	27	4618-413
4	28	4618-414
5	29	4618-415
6	30	4618-416

5 por paq

Detalle de la almohadilla de adhesión

ARTÍCULO 4443-001

Fundente Quick Flo™ Flux

El fundente de fluoruro de Masel, gelatinoso y suave, es ideal para eliminar agentes oxidantes al soldar acero inoxidable. Se obtienen las uniones más duras posibles y se mezcla bien con agua.

- Disponible en tarros de 57 g.
- Utilice Quick Flo Flux para el acero inoxidable.




ALAMBRE DE LABORATORIO

Soldadura de plata para ortodoncia

La soldadura de plata sin cadmio de Masel se puede utilizar con cualquier combinación de oro, plata o acero inoxidable. Muchos laboratorios la prefieren porque:

- El diferencial entre su punto de fusión (660° C) y su temperatura de fluencia es baja, lo que aporta más control durante el manejo.
- Es muy blanda, para mejor adaptación.

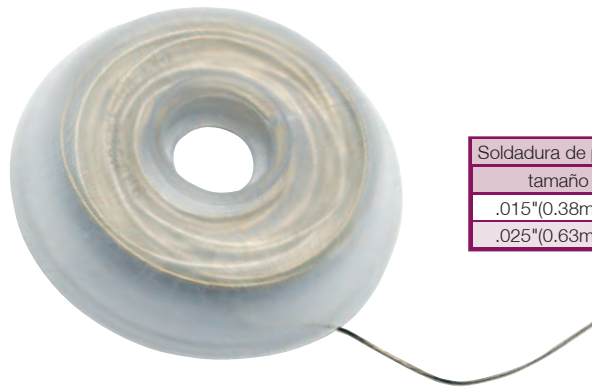


Soldadura de plata para ortodoncia			
tamaño	calibre	50 piezas	c/u
.015"(0.38mm)	5DWT	4104-015	
.025"(0.63mm)	5DWT	4104-025	

Alambre recto de cromo cobalto Masiloy™ de 14"

El alambre de cromo cobalto, blando y fácil de doblar, acepta con facilidad curvas complicadas sin riesgo de roturas. Se recomienda su tratamiento con calor para aumentar su elasticidad en un 20%.

- Admite 2-3 arcos por 14" (35,6 cm) de longitud.
- Sólo tamaños redondos.

Masiloy barras de 14" ●		10 por tubo
diámetro	art. n°	
.028"(0.071mm)	4803-028	
.032"(0.81mm)	4803-032	
.036"(0.91mm)	4803-036	

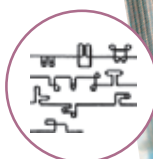

6 barras por tubo.

ARTÍCULO 4104-250

Fundente/Soldadura "todo en uno"

No existe nada más cómodo que las barras premezcladas de fundente/soldadura de plata Masel. Cada una de ellas posee una proporción perfecta de fundente y soldadura que garantiza un porcentaje menor de roturas. Puesto que trabaja con un solo elemento, el proceso es menos engorroso, más sencillo, ahorra tiempo y no se corre el riesgo de aplicar una cantidad errónea de fundente.