



05

Máscaras faciales	52
Arcos faciales	54
Módulos de tracción	55

MÁSCARAS FACIALES


Máscara facial de tracción inversa ComfortMax™

NUESTRA MÁSCARA FACIAL MÁS CÓMODA

Especialmente apropiada para el tratamiento de insuficiencias maxilares, prognatismo mandibular, esquisis palatal y en general para tracciones de atrás hacia adelante.

- Los soportes de la frente y barbilla revestidos con almohadilla de ante genuino aseguran el máximo confort.
- Los soportes, cuidadosamente colocados, no causan problemas visuales.
- Ultraligera, sólo 50 gr.
- Fácil de ajustar vertical y horizontalmente con tornillos ajustables.
- Fabricados en acero inoxidable y material acrílico no tóxico.
- **Talla única.** Incluye: almohadillas y llave hexagonal.


Máscara facial de tracción inversa		
color	art. nº	
gris	3806-611	por unidad

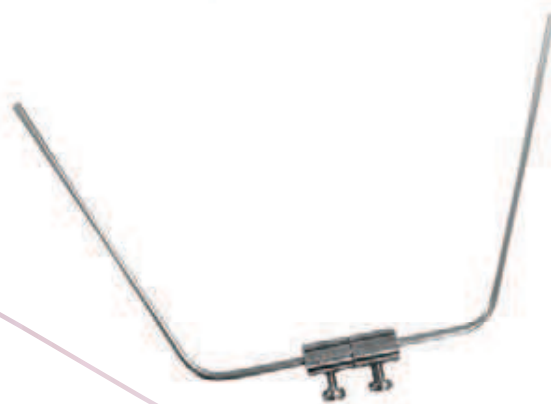

Elásticos extraorales de látex

Los elásticos extraorales de Masel son idóneos para todos los tipos de máscaras faciales.

Elásticos extraorales de látex			1.000 elásticos por paq.
Diámetro interno	8 oz (227G)	16 oz (454G)	
1/4" (6.35mm)	5007-703	5007-803	
5/16" (7.94mm)	5007-704	5007-804	
3/8" (9.53mm)	5007-705	5007-805	
1/2" (12.7mm)	5007-706	5007-806	

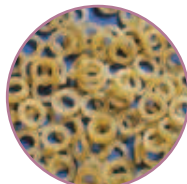


Máscara facial multi-ajustable

Cuenta con un descanso de frente y una copa de mentón con respiraderos dobles para brindar la máxima comodidad y circulación de aire. La copa de mentón se puede ajustar para tener una posición fija o un rango de movimiento completo. Diseñada para distribuir la presión de manera uniforme, lo que le permite tener un rango de movimiento significativo sin rotación de un lado a otro.

- Comodidad máxima para el paciente.
- Ligera.
- Completamente ajustable.
- Dos juegos de almohadillas de repuesto.
- Llave hexagonal incluida.

Máscara facial multi-ajustable		
color	art. n°	por pieza
azul	3806-100	
rojo	3806-101	

Almohadillas y llaves de repuesto		
incluye	art. n°	por pieza
una llave hexagonal y 2 juegos de almohadillas	3806-120	

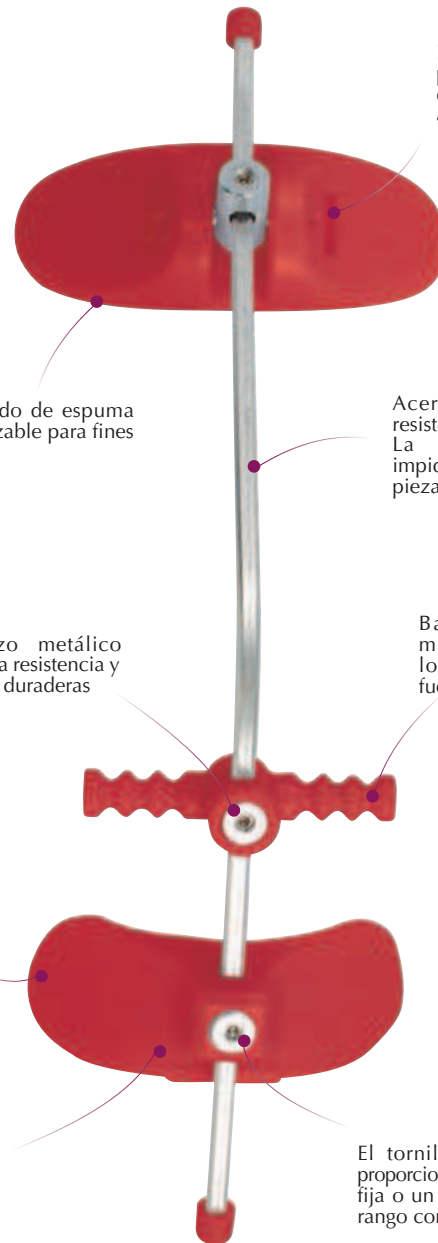

Los respiraderos dobles proporcionan circulación de aire debajo de la almohadilla de espuma

Acolchado de espuma reemplazable para fines médicos

Acero inoxidable resistente a la corrosión. La superficie plana impide la rotación de las piezas

El refuerzo metálico proporciona resistencia y estabilidad duraderas

Barra cruzada multi-ajustable para lograr el ángulo de fuerza exacto

La copa de mentón se desliza suavemente sin rotación de un lado a otro

Los respiraderos dobles proporcionan circulación de aire debajo de la almohadilla de espuma

El tornillo de fijación proporciona una posición fija o un movimiento de rango completo

Características nuevas

Descanso de frente



Copa de mentón



Respiraderos dobles


El descanso de frente y la copa de mentón cuentan con respiraderos dobles para brindar máxima comodidad y circulación de aire

Opción de movimiento

El diseño deslizante permite un rango de movimiento dinámico sin rotación de un lado a otro




ARCOS FACIALES

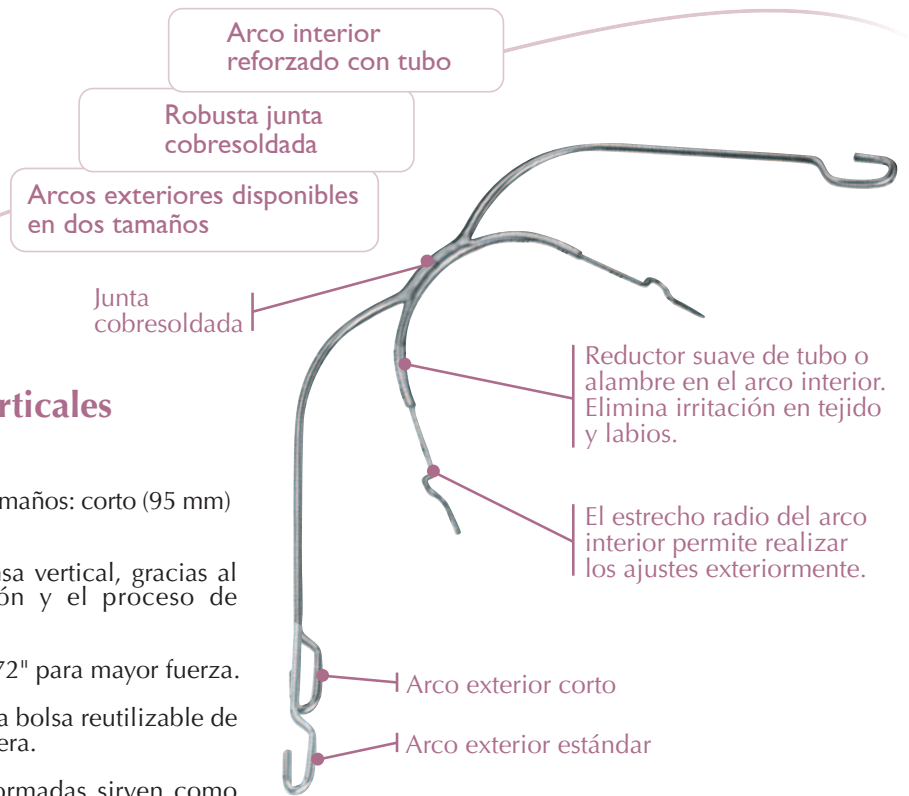

Arcos faciales con ansas verticales

- Arcos exteriores disponibles en dos tamaños: corto (95 mm) y estándar (105 mm).
- Menos distal de ruptura hacia el ansa vertical, gracias al alambre de atenuación de tensión y el proceso de rodamiento.
- Arco exterior con un diámetro de .072" para mayor fuerza.
- Cada arco facial está envuelto en una bolsa reutilizable de polietileno transparente con cremallera.
- Las ansas verticales interiores preformadas sirven como topes ajustables y amortiguadores de golpes.

Arcos faciales con ansas verticales						
diámetro arco interior	no. de tamaño	longitud (mm)	angulación	corto 95mm arco exterior	estándar 105mm arco exterior	por pieza
.045"	1	83	0°	3904-011	3904-031	
.045"	2	90	0°	3904-012	3904-032	
.045"	3	97	0°	3904-013	3904-033	
.045"	4	104	0°	3904-014	3904-034	
.045"	5	111	0°	3904-015	3904-035	

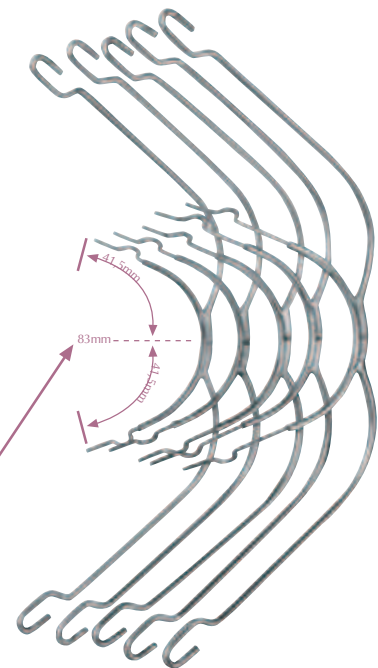

Las longitudes han sido medidas de distal a distal del ansa vertical

MÓDULOS DE TRACCIÓN


Módulos de desenganche de seguridad Nitro™ Force

La función de desenganche evita el efecto tirachinas. Cuando se estire el arco de la frente, este dispositivo se soltará de una forma segura sin herir al paciente. Los módulos de desenganche Nitro se utilizan con almohadillas cervicales y cintas de tracción alta, formando así arcos faciales desmontables.


Módulos de desenganche de seguridad Nitro™ Force			
color	fuerza media	fuerza pesada	5 pares por paq
azul	3804-440	3804-450	
negro	3804-441	3804-451	

Módulo Nitro de fuerza mediana			
nº de marca	gramos promedio	onzas promedio	libras promedio
1	225	8	0.50
2	315	11	0.70
3	391	14	0.87
4	472	17	1.05
5	575	21	1.28
6	671	24	1.50
7	762	27	1.70
8	879	31	1.96
9	1101	39	2.46

Módulo Nitro de fuerza pesada			
nº de marca	gramos promedio	onzas promedio	libras promedio
1	291	6	0.35
2	414	8	0.53
3	524	11	0.72
4	613	14	0.87
5	730	17	1.05
6	875	20	1.22
7	966	22	1.35
8	1104	25	1.55
9	1196	28	1.72
10	1342	30	1.89

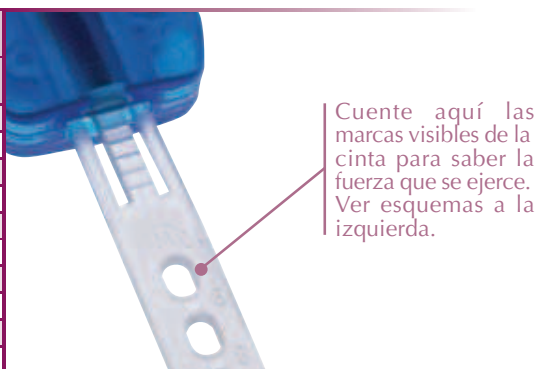

Las 10 perforaciones de ajuste permiten que el arco facial se adapte a pacientes de varias medidas

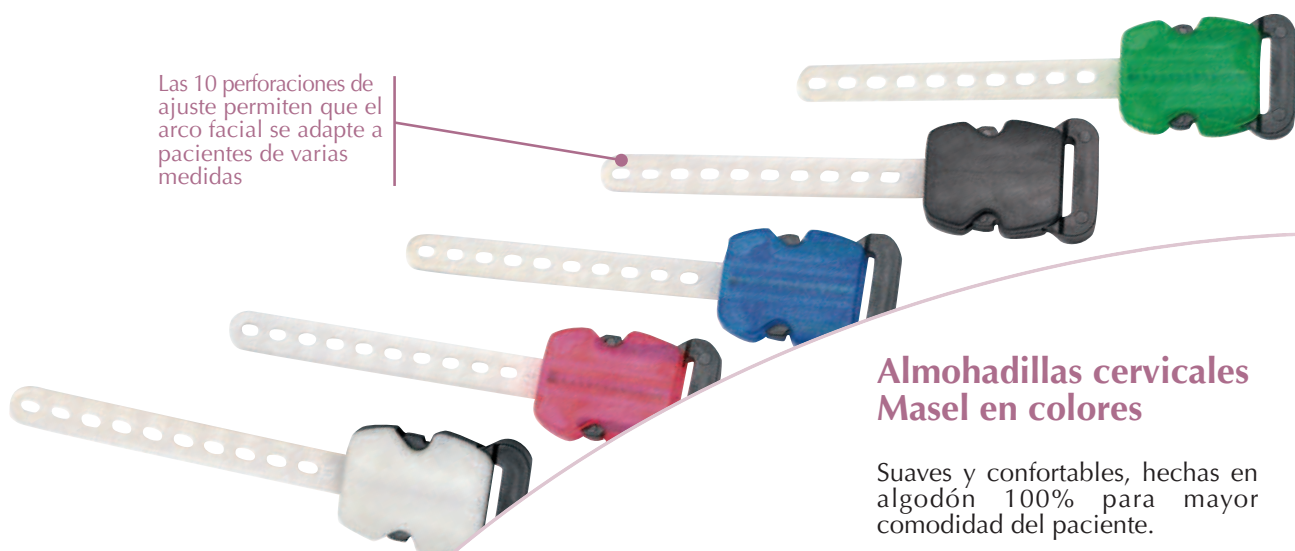

Almohadillas cervicales Masel en colores

Suaves y confortables, hechas en algodón 100% para mayor comodidad del paciente.

Almohadillas cervicales Masel en colores		
color	art. nº	5 por paq
negro con cinta azul claro	3804-380	
negro con cinta rosa	3804-381	
azul tela vaquera	3804-385	

